


Procedimiento malla laparoscópica

ProGYNious



Cuerpo de malla ligera y cuello resistente

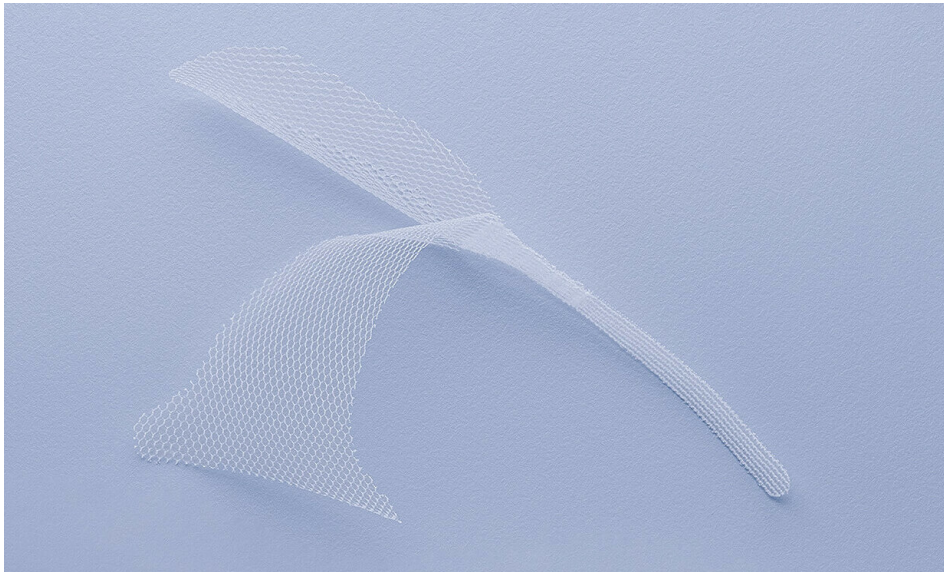

Características

- Combinación de malla ultraligera, de poro grande, suave e isoelástica a nivel vaginal y malla más densa y menos elástica para una suspensión firme
- Aplicable para el procedimiento bien establecido de sacrocolpopexia y sacro cervicopexia
- Componente apical para la suspensión de nivel 1 para prevenir el prolapso vaginal
- El cuello de malla más rígido se fija a nivel del promontorio sacro al ligamento longitudinal

Beneficios

Diferentes variantes de ProGYNious para diferentes necesidades de los pacientes:

- ProGYNious A (anterior) se coloca entre la vagina y la vejiga para evitar el cistocele recurrente
- ProGYNious P (posterior) se coloca entre la vagina y el recto para evitar el rectocele recurrente
- ProGYNious es una prótesis de malla en forma de Y que combina las características de ProGYNious A y ProGYNious P

A.M.I.[®]

Agency for Medical Innovations

Tratamiento del prolapso de órganos pélvicos - ProGYNious

ProGYNious está fabricado con dos tipos de material de malla de polipropileno. ¡Combina lo mejor de ambos materiales para mantener la elasticidad y dar un fuerte soporte a la vez!


1. Cuerpo de malla:
La malla ultraligera de forma hexagonal, con una estructura de poros amplios, se utiliza para reducir la reacción del tejido del cuerpo extraño y permitir una buena integración en la zona vaginal.

2. Cuello de malla:
El cuello de la malla está hecho de un material de malla más firme y denso para una fijación estable al ligamento longitudinal en el nivel del promontorio sacro.

Código de pedido	Descripción del producto	Incluido en la entrega
PFR5731	ProGYNious Cuerpo de malla de polipropileno ultraligero e isoelástico y cuello de malla más denso y menos elástico para una suspensión firme. Para sacrocolpexia y sacrocervicopexia.	1 caja, entregada estéril: 1 x ProGYNious (malla anterior + posterior combinada)
PFR5711	ProGYNious A - Malla anterior Cuerpo de malla de polipropileno ultraligero e isoelástico y cuello de malla más denso y menos elástico para una suspensión firme. Para sacrocolpexia y sacrocervicopexia.	1 caja, entregada estéril: 1 x ProGYNious A (malla anterior)
PFR5721	ProGYNious P - Malla posterior Cuerpo de malla de polipropileno ultraligero e isoelástico y cuello de malla más denso y menos elástico para una suspensión firme. Para sacrocolpexia y sacrocervicopexia.	1 caja, entregada estéril: 1 x ProGYNious P (malla posterior)

La malla en detalle:

- Material de malla ultraligero de 21 g/m²
- Estructura hexagonal para la iso-elasticidad
- Estructura de poro ancho $\geq 1,9$ mm
- Macroporosa
- 93% Porosidad
- Intersticial extragrande microporos: 100-150 μ m
- Polipropileno monofilamento

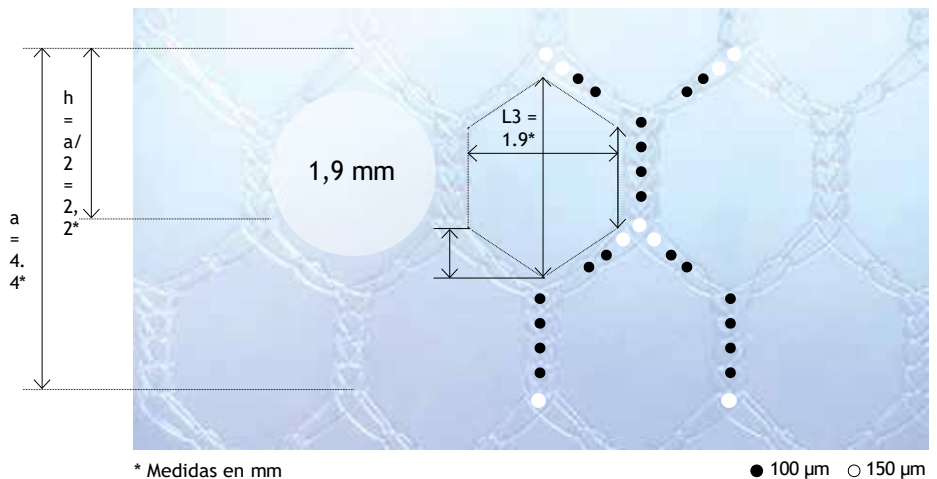

Los productos contenidos en este folleto cumplen los requisitos de la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios y, por tanto, están marcados con la marca CE.

CE 0297 PFR5731, PFR5711, PFR5721

Presurgy SL

C/ Pollensa, 4
28290 - Las Rozas - Madrid
T +34 91 640 20 87
pedidos@presurgy.com
www.presurgy.com

